

DermaSeta™



El más moderno sistema para el tratamiento del cuerpo



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SÍNTOMAS

PROCEDIMIENTOS

• MODELO BÁSICO

Los accesorios no giran:

Asegúrese de que las baterías estén correctamente colocadas en la unidad.

La eliminación del vello parece llevar más tiempo que al principio o es imposible eliminar el vello:

Toque la superficie de la almohadilla. Si la siente suave, es momento de reemplazarla. Siga las instrucciones para el reemplazo de la almohadilla.

Los accesorios se salen cuando se acciona el interruptor de encendido:

Asegúrese de que el accesorio esté correctamente instalado. Al instalarlo, debe escuchar un leve chasquido, que indica que la almohadilla ha quedado firmemente sujeta.

La potencia es notablemente más baja:

Tenga en cuenta que sólo se puede garantizar el desempeño óptimo de la unidad **Derma Seta™** si se utilizan baterías alcalinas recargables recién cargadas.

• MODELO DELUXE

La unidad **Derma Seta™** no enciende:

Para que la unidad **Derma Seta™** encienda, las baterías deben tener suficiente carga. Antes de utilizar el equipo por primera vez, cárguelo durante 24 horas.

Las baterías no se cargan:

No permita que la unidad **Derma Seta™** permanezca sin carga durante un largo período de tiempo. De esta manera, evitará que las baterías pierdan totalmente la carga.

GRACIAS

En nombre de todo el equipo de Thane Housewares, agradecemos su reciente compra del equipo **Derma Seta™**.

Derma Seta™ elimina fácilmente el vello y exfolia la piel por medio de almohadillas exfoliadoras especialmente diseñadas. Trabajamos arduamente para crear este dispositivo ideal para el cuidado de la piel y la eliminación del vello.

Después de pruebas exhaustivas, agregamos este producto a nuestra colección de salud y belleza para el hogar.

Disfrute del equipo **Derma Seta™**...
y, una vez más, gracias.

ÍNDICE

ADVERTENCIA	4 - 5
MEDIDAS DE SEGURIDAD	5 - 6
INTRODUCCIÓN	7
VENTAJAS	8
LISTADO DE PARTES - Modelo Básico	9
LISTADO DE PARTES - Modelo Deluxe	10
OPERACIÓN	11 - 14
<i>Montaje</i>	11
• <i>Modelo Básico</i>	11 - 12
• <i>Modelo Deluxe</i>	13 - 14
CONSEJOS	15
ACCESORIOS	16 - 18
• <i>Cambio de los accesorios</i>	17
• <i>Reemplazo de las almohadillas</i>	18
ELEMENTOS OPCIONALES	19 - 20
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	21

ELEMENTOS OPCIONALES

- *Accesorios*

Almohadilla de cristales Derma grande

Este accesorio fue específicamente diseñado para zonas ásperas en las rodillas y los codos.



Macro y micro módulos

Puede escoger cualquiera de los dos tamaños para reducir la celulitis. Además, mejora la circulación y ofrece un aspecto más terso.



Cepillo de limpieza profunda

Utilícelo para potenciar los beneficios de los limpiadores faciales.



ELEMENTOS OPCIONALES

- *Adaptador de la Unidad Básica*

Si se queda sin batería, puede enchufar el adaptador para continuar utilizando el equipo.

! **Nota:** antes de utilizar el adaptador, quite las baterías de la unidad básica.



- *Modelo Deluxe*

La unidad Deluxe viene con baterías recargables incorporadas y un cargador. Por lo tanto, jamás tendrá que volver a preocuparse por quedarse sin baterías. El selector de velocidad que se muestra en el listado de piezas le permite seleccionar entre dos velocidades: para principiantes o usuarios avanzados.

**!** **ADVERTENCIA**

- Utilice este producto para el uso para el que fue diseñado, tal como se describe en este manual.
- No utilice accesorios que no sean los recomendados por el fabricante.
- Se debe tener mucho cuidado cuando este aparato sea utilizado por personas con algún tipo de discapacidad.
- Si este equipo es utilizado con niños o por ellos, siempre debe haber un adulto supervisando.
- No se debe utilizar en animales.
- No apoye la unidad sobre ninguna superficie mientras esté en funcionamiento.
- **No aplique presión excesiva al realizar el tratamiento. Si aplica demasiada presión, afectará la eficacia del tratamiento. El motor está preparado para detenerse o reducir significativamente la velocidad si se ejerce demasiada presión.**
- Si está retirando gran cantidad de vello, el primer tratamiento puede llevar bastante tiempo.

! **CAUTION**

Si tiene piel sensible, problemas en la piel o problemas circulatorios, debe consultar a un dermatólogo antes de usar este equipo.

! **Nota:** lleve a cabo una prueba en una zona reducida de la piel, 24 horas antes de usar el equipo. Si tiene algún tipo de irritación, deje de utilizar el equipo y consulte a un dermatólogo.

! **Nota:** Es posible que algunas personas presenten un leve enrojecimiento después de utilizar este producto. Esto es normal y el enrojecimiento desaparecerá en una o dos horas. Asegúrese de tener la piel completamente seca antes de comenzar el tratamiento.

- Únicamente para uso externo.
- No elimine el vello en lunares, zonas quemadas por el sol o con abrasiones.
- Evite realizar el tratamiento sobre piel quemada por el sol.
- Utilice únicamente los accesorios especificados para la zona de la cara, el cuello o la línea del bikini. Si desea obtener más detalles, consulte la sección de operación del manual.

⚠ PRECAUCIÓN - continuación

- No aplique lociones antes de usar este equipo.
- No utilice este equipo si tiene afecciones o irritaciones en la piel, como soriasis, eczema, piel sensible, alergia o erupción cutánea, o problemas circulatorios. Si no está seguro, consulte a un médico antes de utilizar este equipo.
- No intente eliminar vello en heridas abiertas, cortes, quemaduras o verrugas
- No utilice el equipo en la misma zona durante un período de tiempo extenso ya que podría provocarse una quemadura.

MEDIDAS DE SEGURIDAD


Tome todas las precauciones necesarias y lea las instrucciones de este equipo de belleza antes de utilizarlo.

- 1) A fin de reducir el riesgo de muerte o las lesiones graves debido a descargas eléctricas:
 - No sumerja este equipo en agua. Desenchúfelo inmediatamente si entra en contacto con el agua.
 - No lo utilice en la bañera o la ducha.
 - Desconecte siempre el equipo después de usarlo o antes de limpiarlo.
- 2) Utilice este equipo únicamente para el fin para el que fue diseñado y no lo utilice con accesorios no recomendados por el fabricante.

- **REEMPLAZO DE LAS ALMOHADILLAS DE CRISTALES DERMA**


Antes de reemplazar las almohadillas de cristales Derma, asegúrese de que la unidad Derma Seta™ esté apagada.

- 1) Quite la almohadilla de cristales Derma del cabezal giratorio.
- 2) Tome la nueva almohadilla de cristales Derma y quítele el autoadhesivo protector de la parte posterior.
- 3) Alinee el borde de la almohadilla de cristales Derma con el borde de la almohadilla giratoria.

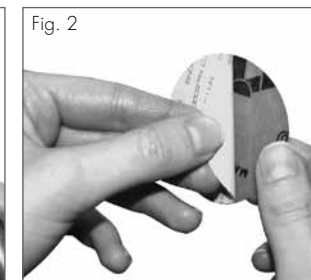

- CAMBIO DE LOS ACCESORIOS

- 1) Asegúrese de que su unidad **Derma Seta™** esté apagada antes de cambiar el accesorio.
- 2) Quite el accesorio colocando un dedo en la pequeña muesca ubicada en el costado de la almohadilla giratoria. Después, tire de la almohadilla giratoria mientras mantiene el dedo en la muesca.
- 3) Tome el accesorio que desee utilizar. Alinee las ranuras del cabezal de su **Derma Seta™** con los clips correspondientes de la parte posterior del cabezal para accesorios. Empuje suavemente el accesorio hasta que quede firme.

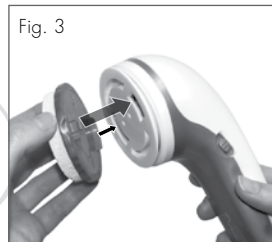

MEDIDAS DE SEGURIDAD - continuación

- 3) Nunca deje el equipo sin supervisión mientras esté enchufado. Mantenga el equipo alejado de superficies calientes.
- 4) Nunca opere ni recargue esta unidad si el enchufe o el cable de alimentación del cargador están dañados o han entrado en contacto con agua.
- 5) No introduzca ni coloque objetos extraños en el cabezal giratorio.
- 6) Nunca mezcle baterías. Debe reemplazar todas las baterías cuando tengan poca carga.
- 7) No intente recargar baterías no recargables. Si carga baterías no recargables puede generarse hidrógeno y esto podría provocar una explosión.
- 8) Observe la polaridad al instalar o cambiar baterías. Las baterías incorrectamente instaladas (al revés) pueden recalentarse y constituyen un riesgo de incendio.
- 9) Retire las baterías descargadas de la unidad. Las baterías viejas pueden derramar líquidos y provocar corrosión.
- 10) Quite las baterías cuando no vaya a utilizar la unidad por un período de tiempo prolongado. Así evitará la corrosión.
- 11) Mantenga siempre las baterías alejadas de los niños.

INTRODUCCIÓN

Bienvenido al sistema más innovador para la eliminación indolora y sencilla de vello. Ahora puede eliminar el vello no deseado de brazos y piernas con rapidez y eficacia; su piel quedará tersa, suave y radiantemente bella. **Derma Seta™** cuenta con una variedad de accesorios y le permite cuidar de su piel en la comodidad de su hogar o donde sea que viaje.

ACCESORIOS INCLUIDOS

La unidad **Derma Seta™** está equipada con una variedad de prácticos accesorios que le permitirán disfrutar de una experiencia total de belleza para la piel:

Almohadilla de cristales Derma – utilícela para retirar el vello y exfoliar la piel al mismo tiempo. Se incluyen 5 almohadillas exfoliantes adicionales junto con el equipo. Consulte las instrucciones para reemplazar las almohadillas de cristales Derma en la página 17.

Alisador para pies – utilice este accesorio para eliminar los callos o la piel áspera de los pies. El alisador para pies se debe utilizar sobre los pies húmedos para obtener mejores resultados.

Almohadilla de gamuza para el cuerpo – utilícela para aplicar lociones sobre el cuerpo. También puede utilizarla para retirar la piel seca después de la exfoliación.

Varilla Derma Seta™ – utilícela para eliminar el vello facial no deseado.

Eliminador del vello para la línea del bikini – utilícelo para eliminar el vello en la zona de la línea del bikini.



CONSEJOS

- Tómese su tiempo para determinar el mejor movimiento para obtener los mejores resultados.
- Los resultados pueden variar, pero después de 10 a 12 veces de utilizar **Derma Seta™** obtendrá un efecto óptimo.
- La almohadilla de cristales Derma fue pensada para uso únicamente en seco. Si la utiliza con líquidos, lociones, cremas de afeitar o geles, podría dañarla.
- Cuando la almohadilla esté notablemente más lisa, cámbiela por una nueva para obtener los mejores resultados.

VENTAJAS

Sabemos que la vida puede ser ajetreada y que cuidar la estética lleva mucho tiempo. Por eso creamos **Derma Seta™**. Nuestro diseño es muy fácil de usar y operar, y deja más tiempo para las cosas importantes de la vida. **Derma Seta™** insume menos tiempo que afeitarse, depilarse con cera o ir al pedicuro, pero ofrece los mismos resultados. Como elimina el dolor, los gastos y el tiempo que se deberían invertir para una visita a un profesional, **Derma Seta™** es el producto ideal para obtener los resultados deseados, en el momento en que lo desee.

Derma Seta™ fue diseñado para eliminar fácilmente el vello y exfoliar la piel por medio de almohadillas con cristales especialmente diseñadas. Estas almohadillas son excelentes para la eliminación suave del vello sobre brazos y piernas. A diferencia de la eliminación con láser, este tipo de eliminación es apta para todo tipo de pieles. Este equipo de belleza multipropósito es compacto, portátil y fácil de usar. Con una variedad de accesorios, su diseño resulta perfecto para eliminar callos, suavizar la piel y aplicar lociones, además de eliminar el vello.

Ya no tendrá que preocuparse por los cortes o las abrasiones provocados por el uso de hojillas de afeitar. **Derma Seta™** le garantiza la eliminación efectiva e indolora del vello no deseado.

Derma Seta™ deja la piel suave y sin vello, mejora la circulación sanguínea y es el mejor producto para la eliminación sencilla e indolora del vello.

LISTADO DE PARTES – MODELO BÁSICO



- 7) El cabezal para accesorios gira únicamente en el sentido de las agujas del reloj. Aplique el disco exfoliante sobre la piel con una leve presión (mantener las almohadillas en un mismo lugar durante mucho tiempo puede provocar lesiones en la piel).
 - 8) Mueva el disco giratorio con movimientos circulares suaves en la dirección opuesta a las agujas del reloj, cubriendo gradualmente toda la zona. Normalmente, tendrá una sensación de calor. A medida que adquiera práctica, usted determinará la cantidad de presión necesaria para eliminar efectivamente el vello.
 - 9) La acción exfoliante hará que se acumule un polvillo blanco sobre la piel. Esto es normal ya que el proceso de eliminación de vello reduce el vello y la piel seca a un polvo que se puede quitar el con el accesorio de cepillo suave. (Consulte la sección sobre accesorios para obtener más instrucciones).
 - 10) Sienta la piel a medida que mueve las almohadillas. Si dejó una zona sin cubrir o llega a una zona más complicada, vuelva a pasar suavemente sobre ella con un movimiento circular hasta que el vello desaparezca.
- !** **Nota:** Si utiliza **Derma Seta™** durante demasiado tiempo sobre la misma zona puede provocarse una quemadura sobre la piel.
- 11) Una vez que haya terminado, lleve el interruptor de encendido a la posición de apagado y vuelva a colocar la unidad en la base de carga.

• **MODELO DELUXE**

1) Conecte la base de carga al adaptador que se entrega con la unidad. Conecte la ficha a un tomacorriente. Aparecerá una luz en la parte delantera de la base. Si la luz es verde, indica que el equipo **Derma Seta™** está cargado. Si la luz es roja, la unidad necesita carga (para obtener mejores resultados, su unidad **Derma Seta™** debe estar totalmente cargada).

Nota: La carga de la unidad puede llevar hasta 4 horas.

3) Una vez que la unidad **Derma Seta™** esté cargada (la luz de la base está verde), asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición de apagado y retire la unidad de la base.

4) Retire el soporte de las almohadillas exfoliantes y coloque el accesorio en el cabezal giratorio.

5) Alinee las ranuras del cabezal giratorio de su **Derma Seta™** con los clips correspondientes de la parte posterior del cabezal para accesorios. Empuje suavemente el accesorio hasta que quede firme.

6) Una vez que el cabezal para accesorios esté firmemente en su lugar, lleve el interruptor de encendido a la posición de encendido (el cabezal giratorio comenzará a dar vueltas). Si lleva el interruptor de encendido una o dos posiciones más arriba, incrementará la velocidad del cabezal giratorio. Puede escoger la velocidad deseada: Baja o Alta.

Nota: No aplique lociones antes de usar este equipo.

LISTADO DE PARTES – MODELO DELUXE



OPERACIÓN

El equipo Derma Seta™ y sus accesorios han sido fabricados cuidadosamente para ofrecer una operación sencilla y resultados excelentes. El grano de las almohadillas fue específicamente formulado para eliminar el vello en brazos y piernas.

Para obtener mejores resultados, siga estos pasos:

Antes de usar el equipo: si tiene el cabello largo, asegúrese de mantenerlo alejado de las almohadillas giratorias porque podría enredarse en ellas. No utilice este dispositivo si tiene cortes o irritación en la piel.

ARMADO

• UNIDAD BÁSICA

- 1) Abra la tapa del compartimiento para baterías, ubicado en el mango del equipo Derma Seta™, y coloque seis baterías AA alcalinas recargables (coloque las baterías respetando la dirección que se indica en el diagrama del interior del compartimiento). Vuelva a colocar la tapa.
- 2) Retire el soporte de las almohadillas de cristales y coloque el accesorio en el cabezal giratorio.
- 3) Alinee las ranuras del cabezal de su Derma Seta™ con los clips correspondientes de la parte posterior del cabezal para accesorios. Empuje suavemente el accesorio hasta que quede firme.

4) Una vez que el cabezal para accesorios esté correctamente colocado, lleve el interruptor de encendido (ubicado sobre el lateral del mango de su Derma Seta™) a la posición de encendido.

5) El cabezal para accesorios gira únicamente en el sentido de las agujas del reloj. Aplique el disco exfoliante sobre la piel con una leve presión (mantener las almohadillas en un mismo lugar durante mucho tiempo puede provocar lesiones en la piel)

! Nota: no aplique lociones antes de usar este equipo.

6) Mueva el disco giratorio con movimientos circulares suaves en la dirección opuesta a las agujas del reloj, cubriendo gradualmente toda la zona. Normalmente, tendrá una sensación de calor. A medida que adquiera práctica, usted determinará la cantidad de presión necesaria para eliminar efectivamente el vello.

7) La acción exfoliante hará que se acumule un polvillo blanco sobre la piel. Esto es normal ya que el proceso de eliminación de vello reduce el vello y la piel seca a un polvo que se puede quitar con el accesorio de cepillo suave. (Consulte la sección sobre accesorios para obtener más instrucciones).

8) Sienta la piel a medida que mueve las almohadillas. Si dejó una zona sin cubrir o llega a una zona más complicada, vuelva a pasar suavemente sobre ella con un movimiento circular hasta que el vello desaparezca.

! Nota: Si utiliza Derma Seta™ durante demasiado tiempo sobre la misma zona puede provocarse una quemadura sobre la piel.

9) Una vez que haya terminado, lleve el interruptor de encendido a la posición de apagado.

! Nota: Asegúrese de que la unidad esté apagada antes de colocarla en el soporte.

DermaSeta™

Distribuido por:

Thane International, Inc.,
La Quinta, CA 92253
www.thane.com

Thane Direct Canada Inc.,
Mississauga, ON
www.thane.ca

Thane Direct UK Ltd.,
Admail ADM3996,
London, W1T 1ZU
www.thanedirect.co.uk



Copyright © 2010 Thane International, Inc.

DS-ENG 22/03/10